




ENHETSINFORMATION
CARE IP MOBILE

SNABBFAKTA

- Batteribackup: 48 timmar
- Digitalt trygghetslarm
- Kommunicerar via GSM/GPRS, men även via SCAIP.
- Samma handhavande som övriga Doro Care-larm
- Enkel installation
- Tio radiosändare kan programmeras till CareIP Mobile



ÖVERSIKT

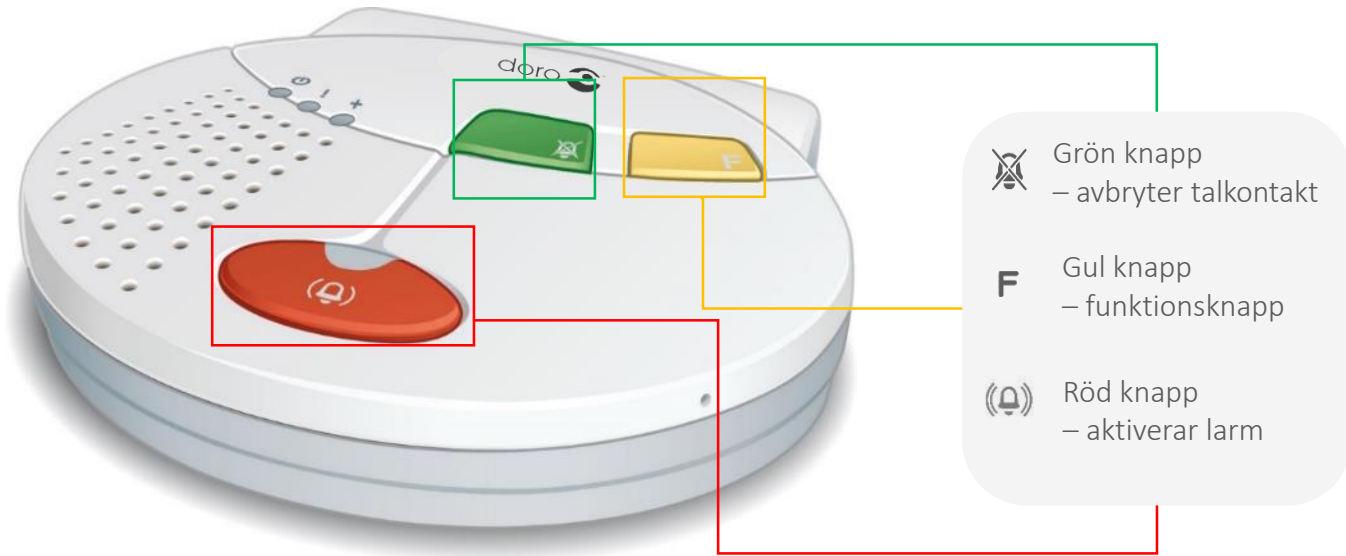

Följande indikeringslampor finns på ovensidan är CareIP 4



Drift, (Grön)

Fast sken: Indikerar nät drift.

Blinkande sken: Nät drift saknas, inprogrammeringsläge radioenhet.



Larm, (Röd)

Fast sken: Normal drift.

Långsamt blink: Aktivt larm.



Fel, (Röd)

Släckt: Inga fel detekterade.

Fast sken: Problem med Ethernet länk eller IP konfiguration.

Långsamt blink: Misslyckad registrering mot SIP server.



Status

Vid GSM funktion:

Släckt: Inga fel


Fast sken: Problem med GSM


1 Volymkontroll: Högtalare justerbar i 8 steg. 

2 Fack för SIM kort

3 Strömbrytare: Till/Frånslag. 

4 DC in: Anslutning av nätadapter 7,5VDC. 

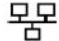5 Nätverk: Anslutning av nätverkskabel från
bredbandsuttag/nätverk. 


6 Anslutning in/utgångar (kabel). 

7 Batterifack

8 Hål för väggmontage


9 PC Dragsnöre: Fäste för dragsnöre
vid vägghängt montage. **PC**

10 Uttag för extern antenn

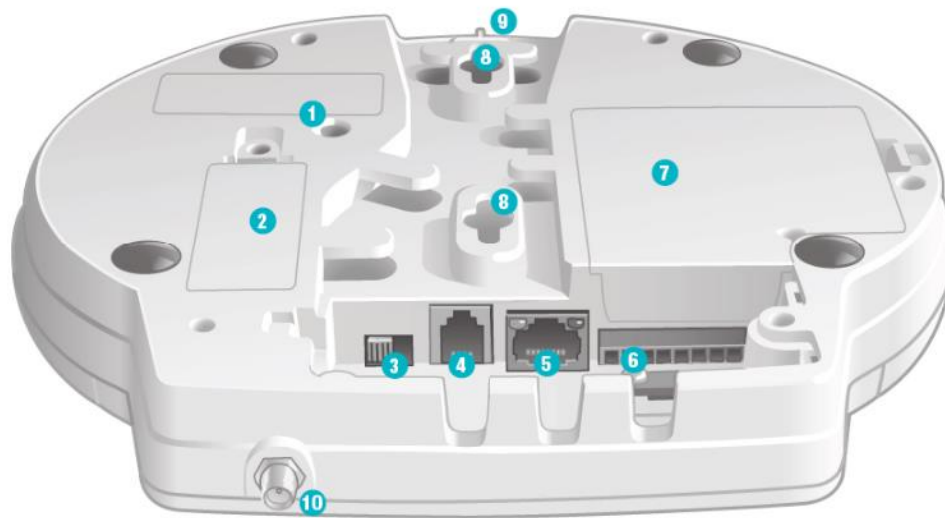

LARMKNAPP ELLIOT


- Larma genom tryck på röd larmknapp
- Byt tillbehör enkelt
- Halsband med säkerhetsupplåsning
- Vattenskyddad IP67
- Easy press concept
- Dubbelriktad kommunikation och funktionsövervakning
- 869 mhz
- Funktionsknapp på sidan (ingen funktion i normalfall)
- Rekonditioneringskit finns att köpa

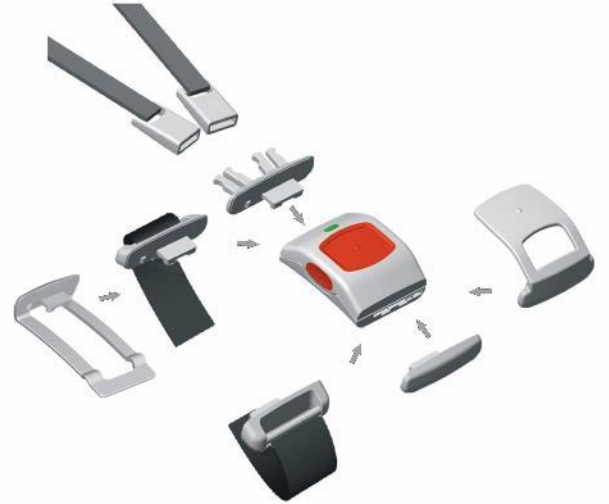


UTFÖRA MOMENT



MONTERA GSM KORT

- **1** Lossa säkerhetsskruven till locket över SIM kortsfacket och avlägsna locket.
- **2** Installera SIM kort enligt bild, med chipet nedåt, och se till att kortet skjuts i ordentligt.

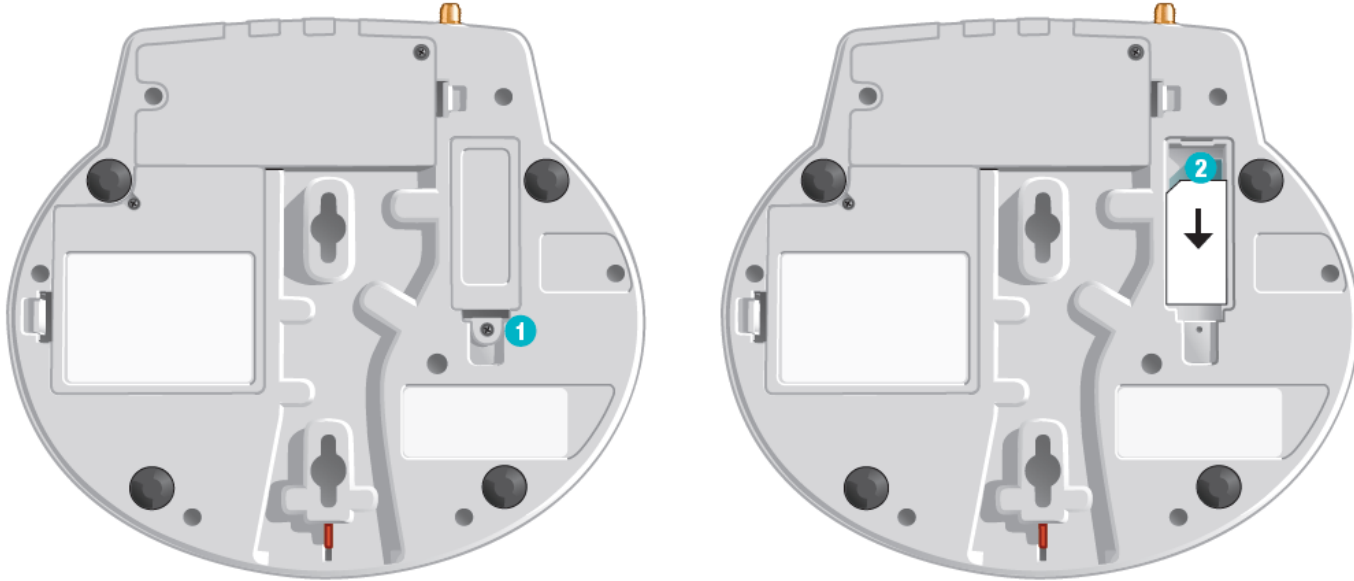

INSTALLERA CAREIP MOBILE

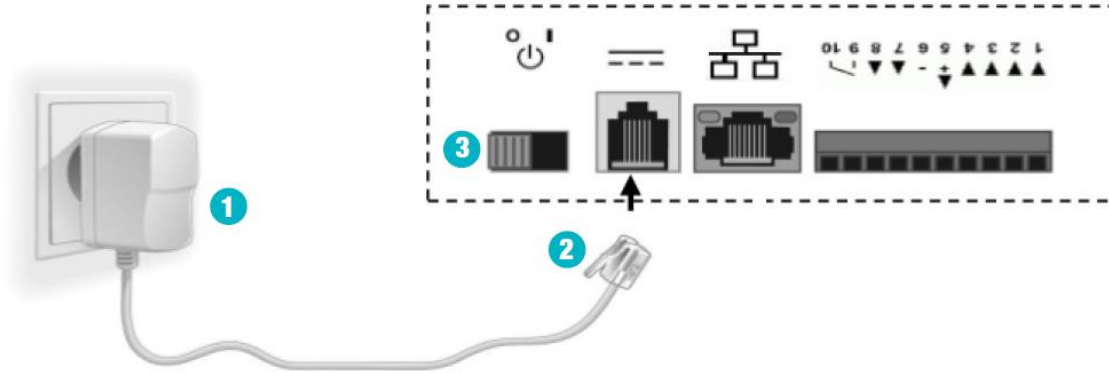

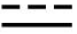- **1** Anslut nätadaptorn till vägguttaget och **2** nätadaptorns kabel till uttaget märkt. 
- **3** Slå på CareIP enheten där strömbrytaren med märkningen  till läge I.


INLÄSNING AV TILLBEHÖR

1. Håll in den gröna knappen i ca 4 sekunder tills ett pip hörs.
2. Driftlampan till vänster börjar nu att blinka.
3. Larma med tillbehöret som ska läsas in.
4. En ljudsignal spelas upp då radiosignalen tas emot.
5. Kvittera inläsningen med röda knappen på trygghetslarmet.




RADERA INLÄSTA TILLBEHÖR

1. Håll in grön knapp i ca 4 sekunder tills ett pip hörs.
2. Tryck därefter direkt in volymknappen på undersidan. En melodi spelas upp för att bekräfta urläsningen.
3. Starta sedan om larmet med strömbrytaren och läs in eventuella tillbehör som ska vara kvar.

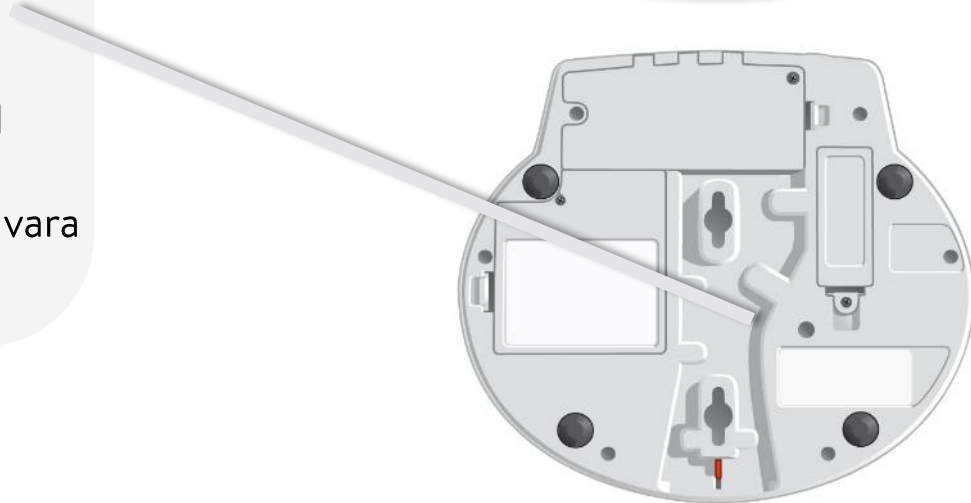

UTFÖRA RÄCKVIDDSKONTROLL

1. Håll in den gröna knappen i ca 4 sekunder tills ett pip hörs.
2. Driftlampan till vänster börjar nu att blinka.
3. Gå runt i bostaden och tryck på larmknappen för att kontrollera att räckvidden är tillräcklig.
4. Apparaten spelar upp en ton när räckvidden är tillräcklig.
5. Avsluta testet med grön knapp eller vänta i 30 sekunder för automatisk återställning.

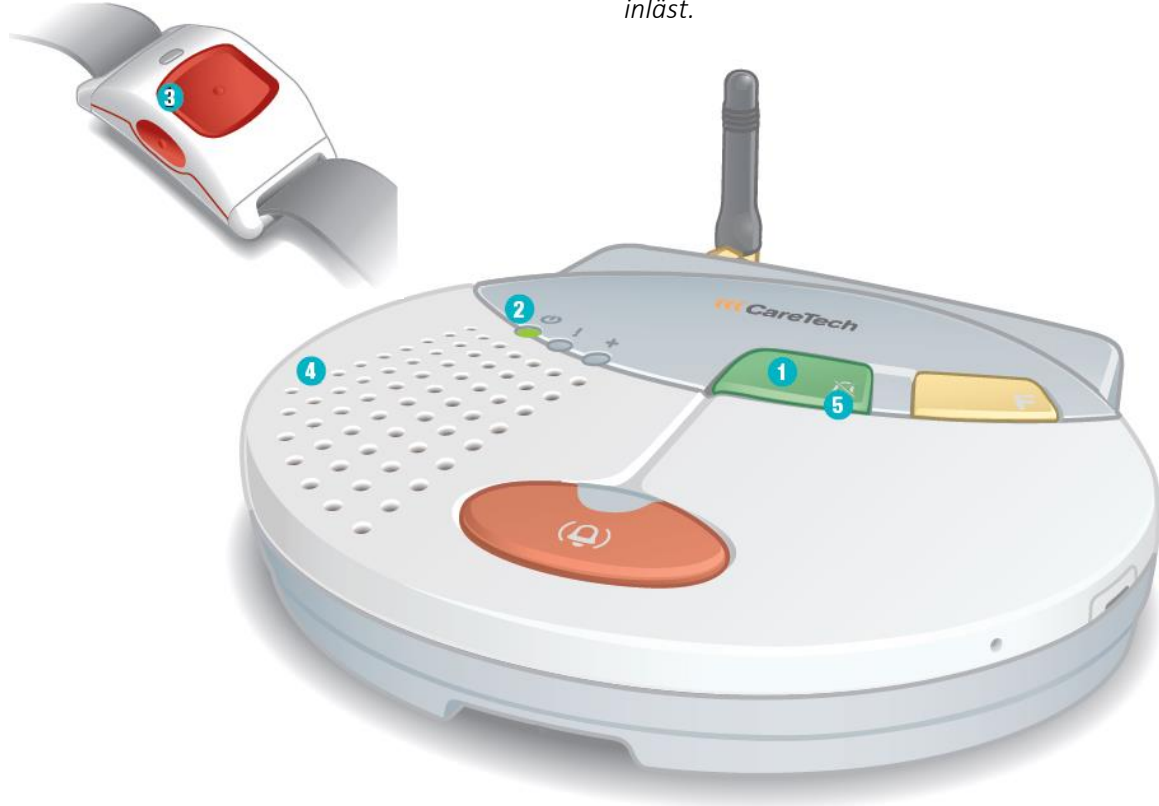

Du får även en Grön-Röd-Grön ljusindikering på larmknappen om räckvidden är tillräcklig. Om endast Grön-Röd blinkar är INTE räckvidden tillräcklig eller så är knappen inte inläst.

KONTROLLERA GSM TÄCKNING

1. Håll in gul knapp i ca 4 sekunder.
2. Tryck direkt efter in volymknappen på undersidan och en röst säger "Servicemode".
3. Knappa med gul eller grön knapp tills rösten säger "User" och tryck därefter på röd knapp.
4. Knappa med gul eller grön knapp till rösten säger "GSM" och tryck därefter på röd knapp.
5. Rösten talar om GSM täckningen på en skala 1-31. Är värdet under 15 bör en extra antenn monteras.

Enheten återgår till normalt läge igen efter 30 sekunder.



BATTERIBYTEN



4 små skruvar på
baksidan.

Tänk på
täthetspackningen!

Vanligt klockbatteri



Stäng av via
strömbrytare.

Skjutlock på baksidan.

2 st vanliga
AA-batteri.



Skicka in till Doro för
batteribyte.

Fraktsedlar kan
beställas av Doro Care
Support.

SUPPORT DORO CARE

Alltid tillgängliga 24-7
Specialistsupport kontorstid

020 – 89 50 00

Support.care@doro.com

