

Koppla en larmknapp/larmenhet till en brukare



1) I Phoniro Care – välj Administration -> Larmenheter

- 2) OM trygghetslarmet eller larmenheten är NY, aktivera den genom att aktivera/tycka på trygghetslarmet eller starta larmenheten genom att sätta i batteri samt aktivera sensorn på On.
- 3) Ändra eventuellt kriteriet för Aktiverade till *Aktiverade och inaktiverade*, om enheten inte tidigare funnits i ert Phoniro Care.

Identifierare Aktiverade **Aktiverade och inaktiverade** ▼

Brukare Koppling **Kopplade och okopplade** ▼


Larmkategori **Alla** ▼ Konfigurerade **Konfigurerade och ej konfigurerade** ▼

Övervakning **Alla** ▼

☐ Endast de med enhetsspecifik maxtid som ej får överskridas mellan "heartbeat".



- 4) Skriv in serienumret i fältet för Identifierare - som återfinns på trygghetslarmets baksida eller enhetens etikett.
- 5) Klicka därefter på Sök.

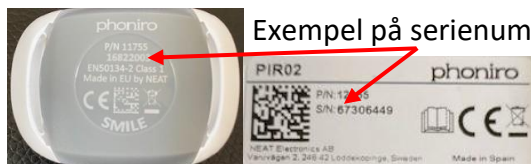

Exempel på serienummer/Identifierare

- 6) Klicka på den blå texten för serienumret som återfinns i sökresultatet.

16822003
Registrerad: 2021-01-15 11:41

Uppgifter

Identifierare Beskrivning

Aktiv ☒

Koppling **Brukare** ▼ ▼

Larmkategori **Trygghetslarm** ▼

Larmkategori för assistans
Under pågående närvaro kan man med hjälp av larmenheten begära assistans av denna larmkategori.

Assistanslarm ▼

- 7) Klicka på pilarna vid varje fält för att ändra och lägga till i följande fält:

Koppling:

Brukare:

Larmkategori:

Larmkategori för assistans:

(Assistanslarm skall endast väljas för larmkategori Trygghetslarm)
Välj *Ingen assistans* för övriga larmkategorier.

- 8) Klicka på Spara:

